

BRONCOFLEX® AGILE

Sterilt videobronkoskop för engångsbruk



axessvision
part of The Surgical Company

HIGH QUALITY VISION & SAFETY.
ANYTIME, ANYWHERE.

BRONCOFLEX® AGILE


LEDNING OCH UNDERSÖKNING

Broncoflex® Agile kan användas tillsammans med endotrakealtuber för att leda tuben till rätt position, och den styva införingsslangen av tvinnad Pebax® underlättar vid inläggning av tuben. Verifiering av korrekt placering av endobronkialtuber med dubbellumen är möjlig för storlek 35 Ch och större.



ERGONOMISKT OCH LÄTTSTYRT

Böjningsmekanismen är smidig med hög noggrannhet och den distala änden kan vinklas upp och ned 220°, vilket är till stor hjälp vid undersökning av bronker, och synnerhet i övre loben i höger lunga.

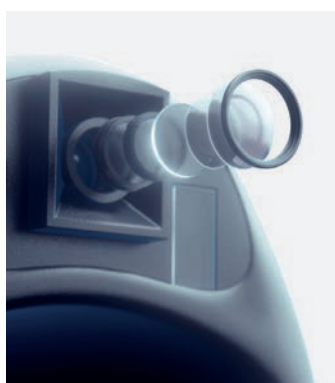

ETT HÖGUPPLÖST SYSTEM

Hela systemet – kamera, gränssnitt och en unik algoritm som utvecklats för att ge en mycket detaljrik bild – är avsett att ge en utmärkt, högupplöst skärmbild. Tack vare justerbar ljusstyrka erhålls god återgivning både proximalt och distalt.



KONTROLL AV SEKRET

Den distala ändens unika form med stor öppning bidrar till förbättrad uppsugning av sekret och vätskor.

TEKNISKA EGENSKAPER

OPTIK	Synfältets riktning	0°
	Synfält	87.5°
	Fältdjup	5–50mm
	Bildupplösning (pixlar)	400×400
	Belysningsystem	2 LED-lampor
INFÖRINGS-SLANG	Böjningsvinkel upp/ned	220°/220°
	Extern diameter på införingsslangen	3,6mm
	Extern diameter på den distala änden	3,9mm
	Arbetslängd	605mm
ARBETS- KANAL	Innerdiameter	1,4mm
STERILISERING	Eten-oxid	
KOMPATIBEL UTRUSTNING	Kompatibel med endotrakealtub (innerdiameter)	5mm
	Tub med dubbellumen (innerdiameter)	35Ch
ARTIKELNUMMER	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD	20030001 10030001 30030000