

BRONCOFLEX® VORTEX

sterilt videobronkoskop för engångsbruk



axessvision


part of The Surgical Company

HIGH QUALITY VISION & SAFETY.
ANYTIME, ANYWHERE.

BRNCOFLEX® VORTEX

DISTAL NAVIGERING

Den distala änden är mindre än hos andra engångsbronkoskop som har en arbetskanal på 2,8 mm. Detta underlättar vid undersökning av distala bronkpartier. Delen som förs in har en liten diameter samtidigt som kanalen är stor. Broncoflex® Vortex kan föras in i endotrakealtuber på 6 mm och större.

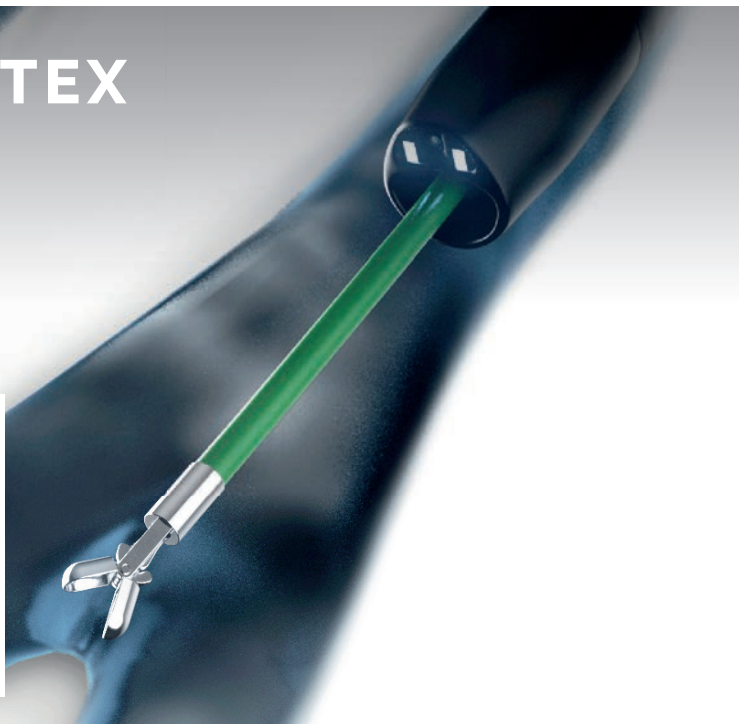

ERGONOMISKT OCH LÄTTSTYRT

Handtaget har ett ergonomiskt grepp som påminner mycket om ett flergångsendoskop, med samma åtkomst till arbetskanal och har en tät biopsiventil.

TEKNISKA EGENSKAPER

OPTIK	Synfältets riktning	0°
	Synfält	87,5°
	Fältdjup	5-50mm
	Bildupplösning (pixlar)	400x400
	Belysningsystem	2 LED-lampor
INFÖRINGS-SLANG	Böjningsvinkel upp/ned	200°/200°
	Extern diameter på införingsslangen	5,4mm
	Extern diameter på den distala änden	5,6mm
ARBETS-KANAL	Arbetslängd	605mm
STERILISERING	Innerdiameter	2,8mm
KOMPATIBEL UTRUSTNING	Eten-oxid	
	Kompatibel med endotrakealtub (innerdiameter)	6mm
ARTIKELNUMMER	Tub med dubbellumen (innerdiameter)	41Ch
	Broncoflex Agile Broncoflex Vortex Screeni HD	20030001 10030001 30030000



ETT HÖGUPP-LÖST SYSTEM

Hela systemet - kamera, gränssnitt och en unik algoritm som utvecklats för att ge en mycket detaljrik bild - är avsett att ge en utmärkt, högupplöst skärmbild. Tack vare justerbar ljusstyrka erhålls god återgivning både proximalt och distalt.



KONTROLL AV SEKRET

Den stora distala öppningen utgörs av en sugkon som bidrar till förbättrad uppsugning av sekret och vätskor vid endoskopets distala ände.